

Pharmahemp d.o.o., Koprška ulica 106C, SI-1000 Ljubljana, Slovenija		PharmaHemp®
NAVODILO ZA DELO S POMIVALNIM STROJEM UC S		
Veljavno od:	Veljavno do:	Šifra: NZD-PRO-016
		Verzija: 02
		Priloge: 1
Izdelal: Klemen Božnik	Pregledal: Gregor Gabron	Odobril: Tine Lavrič

KAZALO

1. NAMEN IN PODROČJE UPORABE	2
2. ODGOVORNOSTI	2
3. MATERIALI IN OPREMA	2
3.1 Oprema	2
3.2 Materiali	2
4. POSTOPKI	2
4.1 Pred zagonom pomivalnega stroja	2
4.2 Uporaba pomivalnega stroja	2
4.3 Ugašanje pomivalnega stroja	4
5. REFERENCE	4
6. PRILOGE	4
7. ZGODOVINA DOKUMENTA	5

1. NAMEN IN PODROČJE UPORABE

Namen tega navodila za delo je opis osnovne uporabe pomivalnega stroja serije UC.

2. ODGOVORNOSTI

Za seznanitev in upoštevanje navodila v tem navodilu za delo je odgovorno osebje zaposleno na področju Proizvodnja in logistika.

3. MATERIALI IN OPREMA

3.1 Oprema

- PR-032, Pomivalni stroj Winterhalter UC S.

3.2 Materiali


- SP-0005, Suhe krpe za brisanje Dastex
- SP-0001, 70% etanol,
- OST-022, Bazično čistilo za strojno pomivanje posode
- OST-023, Sredstvo za strojno izpiranje posode
- OST-021, Protipenilec

4. POSTOPKI

4.1 Pred zagonom pomivalnega stroja

- Pred priklopom naprave v notranjost pomivalnega stroja doziramo en brizg: 5-10 ml protipenilca.

4.2 Uporaba pomivalnega stroja

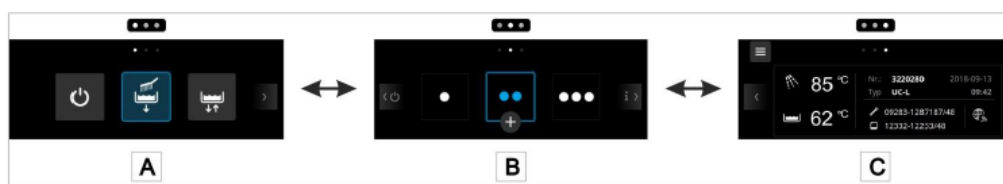


Slika	Funkcije
A	Izklop (► 9.4)
	Samočistilni program (► 11.1)
	Program zamenjave vode v rezervoarju (► 9.3.6)
B	Standardni programi pomivanja (► 6.3) Dodatni programi (► 6.5)
C	Zaslon za informacije

Slika 1 - Glavni meni

- Pomivalni stroj prižgemo s pritiskom na gumb I/O
- Za pomivanje posode zložimo posodo na pladenj.

- Za pomivanje imamo na voljo tri programe, ki se razlikujejo po dolžini pralnega cikla. Izberemo ustrezen program glede na umazanost posode.

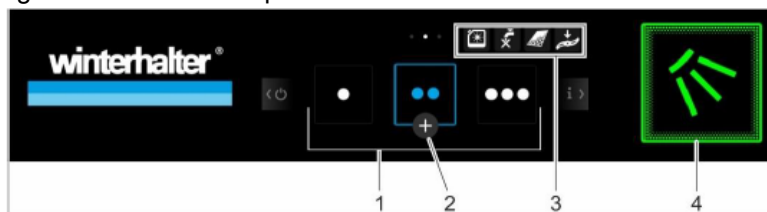

Poz.	Oznaka
1	Standardni programi pomivanja
2	Izbira dodatnih programov
3	Območje za piktograme napak
4	Tipka za začetek

Slika 2 - Meni pranja


- V stroj posodo vstavljamo obrnjeno z odprtino spodaj, da se lahko voda izcedi. Pribor vstavimo v poseben koš za pribor. Manjše laboratorijske čaše prav tako zataknejo v košaro.
- Za zagon pomivanja izberemo program glede na umazanost posode in ga zaženemo z gumbom za zagon pomivanja.



Slika 3 - Vstavljanje posode v stroj

- Po pranju posodo speremo z vodo in obrišemo z etanolom

4.3 Ugašanje pomivalnega stroja

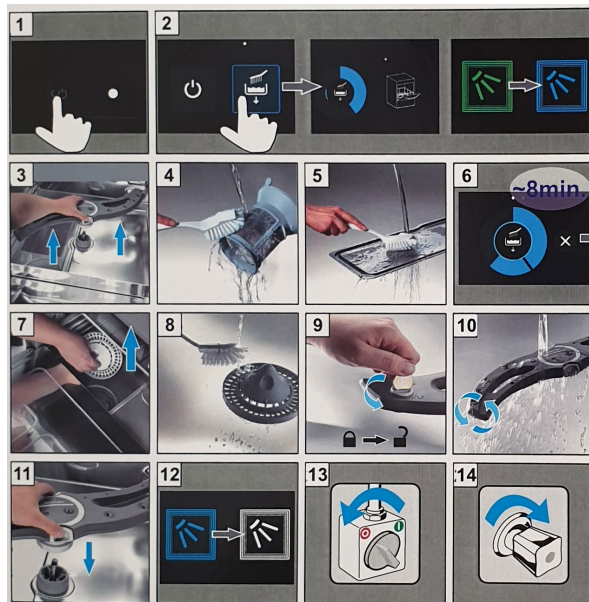

Slika 4 - navodila za ugašanje stroja

- Iz stroja poberemo vso posodo.
- Korak 1 - V meniju se pomaknemo levo.
- Z gumbom pri koraku 2, vključimo praznjenje vode iz bobna.
- Koraki 3,4,5 - Po končanem ciklu praznjenja očistimo rotor spodaj in filter kartušo ter pokrov filtra.
- S pritiskom na gumb pri koraku 6 sprožimo še drugi cikel praznjenja.
- Koraki 7, 8, 9, 10 Po končanem drugem ciklu operemo še filter na odtoku in izpraznimo vodo iz rotorjev.
- Rotorje in filter namestimo nazaj.
- Stroj se nato izklopi sam. V kolikor bomo odsotni za več kot en teden ugasnemo stroj še na glavnem stikalu in izključimo vodo na ventilu (koraka 13 in 14).

5. REFERENCE

- ISO 9001:2015 - Sistemi vodenja kakovosti - Zahteve
- ISO/IEC 17025:2017 - Splošne zahteve za usposobljenost preskuševalnih in kalibracijskih laboratorijev
- ISO 22000:2018 - Sistemi vodenja varnosti živil - Zahteve za vsako organizacijo v prehranski verigi
- ISO 22716:2007 - Kozmetika - Dobra proizvodna praksa (GMP) - Smernice za dobro proizvodno prakso
- Smernice z dne 19. marca 2015 o načelih dobre distribucijske prakse za zdravilne učinkovine za zdravila za uporabo v humani medicini (2015/C 95/01) (GDP)

6. PRILOGE

- Priloga 1: Dnevnik uporabe

NAVODILO ZA DELO S POMIVALNIM STROJEM UC S	Pharma  Hemp®
	Šifra: NZD-PRO-016
	Verzija: 02

7. ZGODOVINA DOKUMENTA

Verzija	Razlog za spremembo	Veljavno od	Zamenjano z novo verzijo (datum, podpis)
01	Prva izdaja	19. 08. 2019	
02	Pregled dokumenta zaradi poteka veljavnosti.		

Pharma Hemp®

Šifra: OBR1-NZD-PRO-016

Stran ____ od ____

[illegible]